



Medical Sales Organization of Mehr Azatab Company

سازمان فروش پزشکی شرکت مهرآزماطب



مهرآزماطب
MehrazmaTeb

♥ ♀ 🧪

مهرآزماطب در یک نگاه

مهر به معنای خورشید است و آرزوی ما درخشش خورشید سلامتی در آسمان کشور عزیزمان ایران است... هلدینگ بزرگ مهرآزماطب ایرانیان با نام تجاری مهرآزما به عنوان یکی از برندهای معتبر و شناخته شده در صنعت توزیع و پخش کالاهای آزمایشگاهی، کالاهای پزشکی و مواد اولیه صنایع غذایی و شیمیایی و تولید یخچال های آزمایشگاهی و دارویی مطرح می باشد. افتخار ما ۳۰ سال فعالیت و ارائه خدمات و محصولات مهم و استراتژیک به بازار داخلی و خارجی می باشد. رضایت مشتریان و رشد و توسعه فعالیتهای هلدینگ در این سالها گواه این ادعا است.

ما به پشتوانه تخصص، تعهد و تجربه خود در تامین بازار داخلی، در نظر داریم اقدام به پوشش بازار منطقه ای نماییم و ضمن تامین و واردات محصولات پزشکی، آزمایشگاهی و مواد شیمیایی مورد نیاز صنایع داخلی کشورمان، اقدام به تامین نیازهای صنایع سایر کشورهای منطقه نموده تا بدینوسیله گامی بزرگ در جهت رشد همکاری های اقتصادی منطقه ای و کمک به اعتلای اقتصاد و روابط دوستانه بین کشورهای منطقه برداشته باشیم.

اخیرا متخصصین ما در بخش تحقیق و توسعه با مساعدت و همراهی یکی از صنعتگران بزرگ کشورمان، قدمی بزرگ در صنعت تولید داخل برداشته و اقدام به تولید یخچال های ویژه نگهداری دارو و مواد پزشکی و آزمایشگاهی نموده اند. این محصول که حاصل تلاش شبانه روزی جوانان و متخصصان مهرآزماطب و ارتباطی ارزشمند میان دانشگاه و صنعت می باشد، از نظر کارایی و کیفیت در منطقه و حتی دنیا بی نظیر بوده و مورد نیاز و تقاضای بخش بزرگی از بازار تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی می باشد. امید است در سایه ی عنایت پروردگار و با تکیه بر تخصص و تلاش خستگی ناپذیر خانواده ی بزرگ مهرآزما، هر روز شاهد رشد همکاری های اقتصادی در منطقه باشیم.

چشم انداز

چشم انداز هلدینگ مهرآزماطب تبدیل شدن به رهبر بازار در زمین تامین و توزیع تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، مواد شیمیایی و تولید یخچال های آزمایشگاهی می باشد به طوری که نیاز کلیه مشتریان در سراسر ایران و همچنین منطقه، با بهترین کیفیت و قیمت و ارائه بالاترین استاندارد خدمات و تحویل، برآورده گردد. تلاش همه ی پرسنل و مدیران سازمان های زیر مجموعه در این هلدینگ، جلب اعتماد مشتریان و خدمت صادقانه به آنهاست به نحوی که احساس امنیت و توانمندی و آرامش را در زندگیشان تجربه کنند.

سازمان ها

شرکت مهرآزماطب به عنوان یکی از بزرگترین تامین کنندگان مواد اولیه، بخش عظیمی از نیاز صنایع کشور را تحت پوشش قرار داده و مواد شیمیایی، صنعتی، دستگاه ها، تجهیزات آزمایشگاهی، شیشه آلات و انواع محیط های کشت مورد نیاز آنها را تامین و در اختیار مشتریان محترم این سازمان ها قرار می دهد. این شرکت در راستای تامین بدون واسطه و ارائه بهترین قیمت، همواره پیشرو بوده و آماده خدمت به مشتریان ارجمند خود می باشد. این سازمان توانایی تامین مواد اولیه و مورد نیاز صنایع غذایی مختلف از جمله کارخانجات لبنیات، روغن ها و چربی های خوراکی، چیپس و پفک، نوشیدنی ها و آبمیوه، خشکبار و میوه جات، شوینده ها و بهداشتی، آرد و غلات، گوشت، سوسیس و کالباس، کمپوت و کنسرو، کارخانجات تولید آدامس، آبنبات، پاستیل و ژله، زعفران و نبات، قند و شکر، شکلات و عسل، کیک و کلوچه و همچنین تامین ملزومات در آزمایشگاه های مرجع صنایع مختلف، تامین مواد اولیه در صنعت داروسازی و تامین مواد اولیه در کارخانجات صنعتی مختلف را دارا می باشد. همچنین تامین کلیه اقلام و ملزومات مصرفی عمومی در بخش های تجهیزات و دستگاه های آزمایشگاهی، شیشه آلات آزمایشگاهی، محیط کشت آزمایشگاهی، مواد شیمیایی عمومی، لوازم مصرفی پزشکی و لوازم مصرفی عمومی در کلیه صنایع مختلف از جمله توان مندی های دیگر این سازمان می باشد.



MehrazmaTeb





تأمین کالاهای مصرفی و تجهیزات کلیه ی کلینیک‌های تخصصی و زیبایی، کلینیک‌های دامپزشکی، داروخانه‌ها و درمانگاه‌های سراسر کشور بخشی از خدمات هلدینگ مهرآرما طب در سازمان فروش پزشکی می‌باشد. نمایندگان و مشاوران علمی ما در بخش محصولات پزشکی به صورت مداوم اقدام به ارائه مشاوره به پزشکان و متخصصان پزشکی جهت کمک به انتخاب بهترین و باکیفیت‌ترین کالاها از برندهای معتبر در بازار تجهیزات پزشکی، می‌نمایند و پوشش بیش از ۸۰ درصدی داروخانه‌های استان خراسان رضوی و تعداد زیادی از کلینیک‌ها و درمانگاه‌های سراسر کشور مهرآرما را تأییدی بر اعتماد مشتریان به مهرآرما می‌باشد.

این سازمان با توجه به نیاز مشتری محترم از دامنه محصولات و همچنین کاربرد آن در **دو بخش عمومی و تخصصی** همواره حضور پررنگ در حوزه تجهیزات پزشکی و کالای سلامت باکیفیت داشته است. این محصولات در چند دسته بندی تأمین و استفاده می‌گردند.




- چسب و پانسمان
- ملزومات تزریق
- البسه بیمارستانی و کلینیکی
- توان بخشی
- محصولات طبی
- محصولات مصرفی
- محصولات سلامت

این سازمان دارای تیم فروش نفرات شامل تیم مویرگی مشهد، مویرگی شهرستان می‌باشد که مدیریت بازار را در حوزه مصارف پزشکی و دارویی دارا می‌باشد. در این سازمان نمایندگی انحصاری مارک‌ها و شرکت‌های معتبر را در اختیار دارد.



فروش تنها به عنوان یکی از مسئولیت های مشاوران فروش در این سازمان تعریف شده است. ایشان متعهد هستند تا به عنوان مشاورین امین شما در مشاوره و انتخاب تخصصی کالای مورد نیاز، انواع برندهای موجود در بازار و تهیه مرغوب ترین محصولات به خدمت رسانی مشغول باشند. افتخار شرکت مهرآزماب در طول حدود سی سال سابقه فعالیت خود این بوده است که همواره مرجعی برای مشاوره صحیح و انتخاب بهترین کالا و مناسبترین قیمت برای مشتریان خود بوده است. این مرجعیت حاصل اعتماد شما مشتریان عزیز و وفادار به سازمان بوده است.

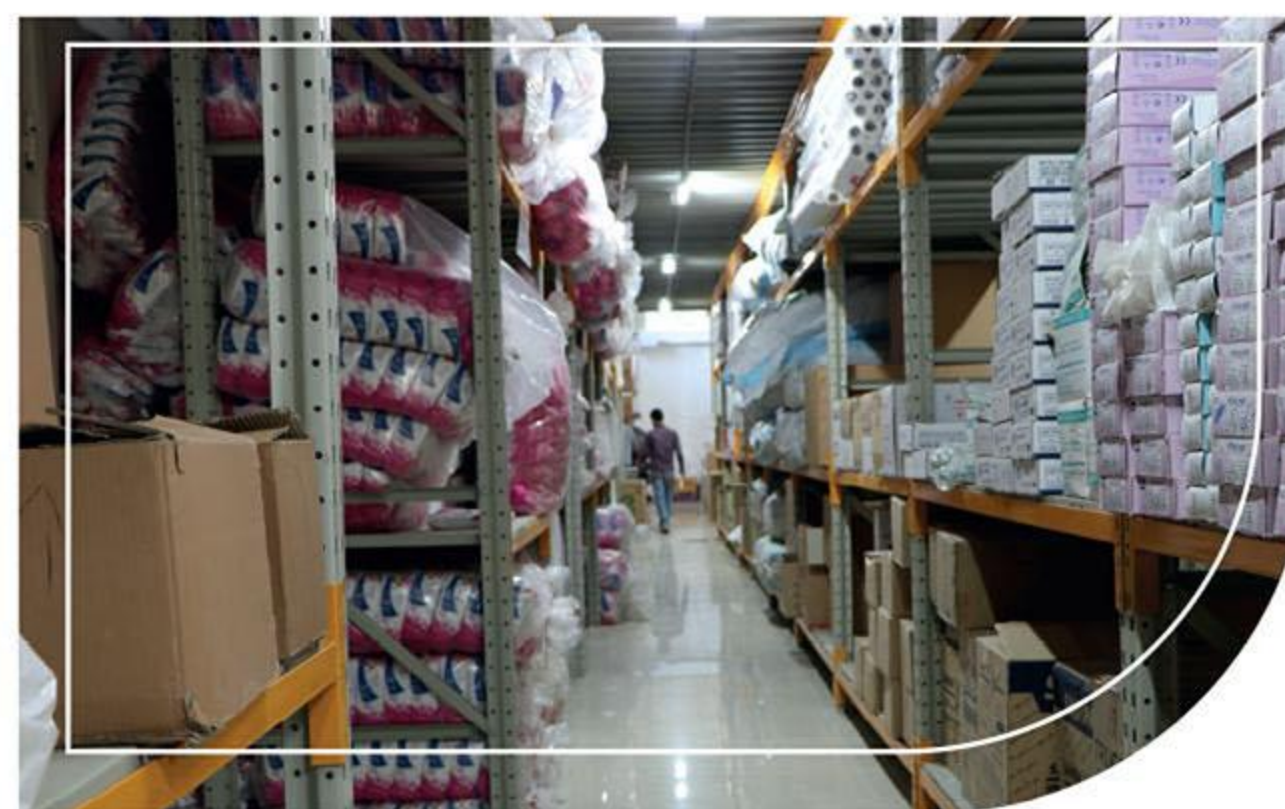

معرفی
سازمان پزشکی

- بزرگترین سازمان فروش شرکت مهرآزما از لحاظ تعداد نیروی انسانی و حجم کالای موجود در انبار

- بیش از ۳۰۰۰ قلم کالای ثبت شده در انبار سازمان فروش پزشکی



● گروه محصولات سرنگ و سرسوزن و خانواده تزریق

● سازمان پزشکی شرکت مهرآرما طب در راستای نیازسنجی بازار و تهیه ملزومات مورد نیاز جامعه پزشکی کشور اقدام به اخذ نمایندگی از برندهای معتبر تولید کننده در حوزه سرنگ و سرسوزن نموده است. همچنین با توجه به گستردگی و تنوع محصولات این گروه، تمام تلاش خود را نموده است تا بتواند پاسخگوی نیاز بیمارستان ها و مراکز خدمات درمانی در جهت تامین این محصولات باشد. در ذیل به برخی از محصولات این گروه اشاره می گردد:

- نماینده انحصاری سرنگ های آوا پزشک در استان های خراسان رضوی و جنوبی سرنگ ۳ و ۵ و ۱۰ و ۲۰ لئورلاک-اسلیپ
- عرضه کننده سرنگ های سها سرنگ ۲، ۵، ۱۰، ۲۰ و سرنگ انسولین
- عاملیت فروش مینا سرنگ در استان خراسان سرنگ ۲، ۵، ۱۰، ۲۰، ۵۰ و سرنگ گاواژ
- عرضه کننده انواع سر سوزن سرسوزن های مختلف از گیج ۱۶ الی ۲۳

● هر کدام از انواع قلم را که استفاده می کنید، نیاز به یک سر سوزن قلم انسولین جدید بر روی قلم برای هر تزریق دارید و پس از هر بار مصرف باید آن را دور بیندازید.


**سر سوزن
پن انسولین**

● لانست ها دارای سوزن بسیار نازکی می باشند که جهت گرفتن نمونه اندک خون مویرگی به اندازه یک قطره بطور سریع و بدون درد استفاده می شوند

**لانست
Lancet**

● برای تزریق خون و مشتقات خونی، برای تزریق همزمان دو نوع مشتق خونی، دارای فیلتر برای جلوگیری از آلودگی

**ست تزریق خون
Blood transfusion set**

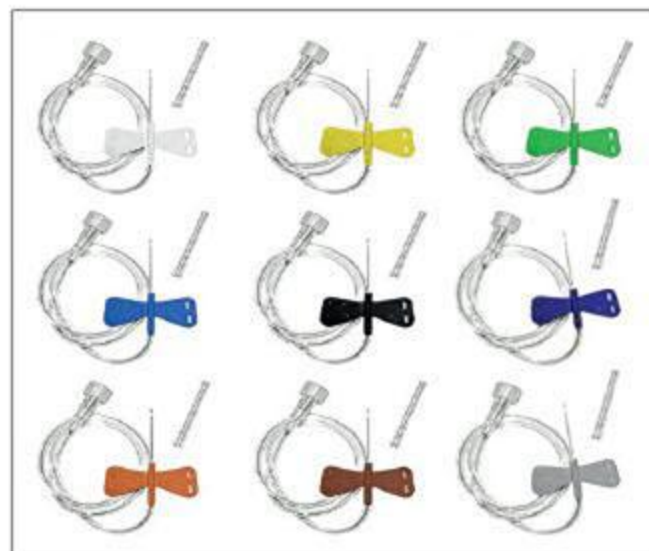

گروه محصولات
سرنگ و سرسوزن
و خانواده تزریق

- سر سوزن
- پن انسولین
- لانست
- ست تزریق خون
- آنژیوکت
- سرنگ انسولین
- اسکالپ



● جدول رنگ های آنژیوکت ●

اندازه	کاربرد	رنگ
۱۴g	انتقال خون، جایگزینی مایعات	(قهوه ای) نارنجی
۱۶g	انتقال خون، جایگزینی مایعات	خاکستری
۱۸g	استفاده کلی (تزریق دارو، جایگزینی مایعات، انتقال خون)	سبز
۲۰g	تزریق داروها/دارو	صورتی
۲۲g	تزریق داروها/دارو	آبی
۲۴g	کودک / نوزاد	زرد
۲۶g	نوزاد	بنفش

● آنژیوکت وسیله‌ای چندکاره است که برای تزریق‌های مکرر یا طولانی مدت سیاهرگی داروها، خون یا سایر محلول‌های تزریقی به تنهایی یا ترکیبی از آن‌ها به کار می‌رود.

● سرنگ انسولین آواپزشک، سرنگ انسولین سرچدا، سرنگ انسولین سه‌ها، سرنگ انسولین BD، سرنگ انسولین حلما و سرنگ انسولین آنالوگ

آنژیوکت
intravenous cannula

سرنگ انسولین
Insulin Syringe

اسکالپ
Scalp

هپارین لاک (صفر بند)
Heparin Lacquer

● در رنگ بندی های مختلف که بر اساس هر رنگ سایز اسکالپ نیز مشخص می‌شود: ۱۹ سفید، ۲۰ زرد، ۲۱ سبز، ۲۲ مشکی، ۲۳ آبی، ۲۵ نارنجی، ۲۷ طوسی اسکالپ وین یا سوزن پروانه ای یک ابزار پزشکی است که از آن برای سوراخ کردن و بدست آوردن رگ های زیر پوست و سطحی، برای تزریق وریدی دارو، خونگیری های وریدی استفاده می‌شود. اسکالپ وین از کدهای رنگی مختلفی استفاده می‌شود. اندازه آنها از ۱۹ تا ۲۷ گیج است که هر چه گیج بالاتر باشد سوزن آن کوچکتر می‌شود.

● کم حجم، یکبار مصرف و استریل، بدون لاتکس و حساسیت و بدون تب‌زا، مناسب باز نگاه داشتن رگ برای تزریقات، ایمنی بالا و قابلیت چند بار سوراخ شدن، قابل اتصال به آنژیوکت، ست سرم و میکروسست، راحتی بیمار برای جلوگیری از درد تزریقات، قیمت مناسب و کاربرد فراوان با رنگ ملایم، قابل استفاده با کاتترهای شریانی یا وریدی، مناسب جهت جلوگیری از برگشت خون، بسیار صاف، بدون هیچ لبه و پلیسه



گروه محصولات سرنگ و سرسوزن و خانواده تزریق



• حاوی الکل ۷۰ درصد، دارای خاصیت ضد عفونی کنندگی، امکان استفاده روی پوست و انواع سطوح، مناسب برای ضد عفونی کردن پوست، پیش از انواع تزریقات، مناسب برای ضد عفونی سطوح کوچک و پر کاربرد مانند دستگاه های تلفن همراه، بسته بندی کوچک مناسب قراردی در جعبه کمک های اولیه، مناسب استفاده در فضاهای بیمارستانی، پزشکی، کاری و خانگی، مناسب برای ضد عفونی دست ها.

**پد الکلی
Alcohol pad**

**سرسوزن اسپاینال
Spinal needle**

**میکروست
Specialized Burette set**

**ست سرم
Disposable Infusion set**

**سیفتی باکس
Safty Box**



گروه محصولات
سرنگ و سرسوزن
و خانواده تزریق

- هپارین لاک
- اسکالپ
- سرنگ انسولین
- آنژیوکت
- ست تزریق خون
- لانست
- سرسوزن
- پن انسولین
- سرسوزن اسپاینال
- میکروست
- ست سرم
- پد الکلی
- سیفتی باکس

• سوزن اسپاینال اولین سوزن Atraumatic در جهان است. بسته بودن انتها و انحنا دار بودن سرسوزن سبب می شود دیواره غشای اطراف مایع نخاعی را بدون زخمی کردن کنار بزند. بعد از خروج سوزن از دیواره، لایه ها دوباره به جای خود باز می گردند و زخمی باقی نمی ماند و از ترشح مایع مغزی نخاعی به بیرون نیز جلوگیری می شود.

• شامل محفظه ای مدرج (بورت) جهت کنترل دقیق میزان ماده تزریقی و نشان دادن سطح مایع، مجهز بودن به قطعه ای شناور که درون محفظه مدرج، جهت قطع اتوماتیک جریان مایع پس از تخلیه کامل محفظه مدرج، قرار می گیرد. مجهز به شیر غلطکی جهت تنظیم جریان مایع، دارای لوله های کاملاً شفاف جهت مشاهده حباب که در مایع تزریقی ایجاد گردد.

• در مدل های مختلف از قبیل با سر سوزن، بدون سر سوزن و ... می باشد. ست سرم زمانی استفاده می شود که می خواهیم مقدار زیادی از مایع را تزریق کنیم، یا زمانی که نیاز داریم دارو را در مقدار زیادی مایع رقیق کنیم تا تفاوت صحیح داشته باشد یا از سوزش و خراش جلوگیری کنیم.

• در انواع سایز کوچک (پرتابل و قابل حمل)، سیفتی باکس مناسب افراد دیابتی، سیفتی باکس های بیمارستانی و ... و در رنگ بندی های زیر قابل عرضه می باشد.

• **زرد (Medical):** مناسب دفع پسماندهای عفونی و اشیاء نوک تیز کاملاً تخلیه نشده

• **نارنجی (Fully Discharged):** مناسب دفع پسماندهای عفونی و اشیاء نوک تیز کاملاً تخلیه شده

• **بنفش (Cytostatic/Cytotoxic):** مناسب دفع اشیاء تیز آلوده به مواد Cytostatic/Cytotoxic

• **آبی (Pharmaceutical):** مناسب دفع پسماندهای دارویی با بسته بندی یا بدون بسته بندی اصلی

جدول رنگ بندی و گیج سرسوزن

رنگ هاب	اندازه گیج	قطر خارجی
نارنجی	۳۲	۰/۲۳ میلی متر
بنفش	۳۱	۰/۲۵ میلی متر
زرد	۳۰	۰/۳ میلی متر
قرمز	۲۹	۰/۳۳ میلی متر
خاکستری	۲۷	۰/۴ میلی متر
نارنجی	۲۵	۰/۵ میلی متر
آبی تیره	۲۳	۰/۶ میلی متر
مشکی	۲۲	۰/۷ میلی متر
سبز	۲۱	۰/۸ میلی متر
زرد	۲۰	۰/۹ میلی متر
صورتی	۱۸	۱/۲ میلی متر
سفید	۱۶	۱/۶ میلی متر



● نماینده انحصاری سرنگ های آوا پزشکی ●

● سرنگ آوا پزشکی ●



● شرکت تولیدی و صنعتی آوا پزشکی در سال ۱۳۷۵ در فضایی به مساحت ۱۳ هکتار و فضای تولیدی بیش از ۱۳۰۰۰ مترمربع در شهرک صنعتی آشتیان آغاز به کار نمود. در سال های اخیر پس از توسعه فضای تولید کارخانه، فضای تولیدی به بیش از ۲۴۰۰۰ مترمربع افزایش یافته است. دو دهه تلاش برای خوب ماندن و بهتر شدن، مزایایی از جمله برخورداری از دانش فنی، فن آوری های به روز و نیروهای متخصص و کارآمد برای آوا پزشکی به همراه داشته است که نتیجه آن علاوه بر تأمین نزدیک به ۸۵٪ نیاز کشور به سرسوزن یکبار مصرف پزشکی و صادرات سرسوزن به کشورهای اروپایی و آسیایی، توسعه محصولات در حوزه های مختلف پزشکی بوده است.

جدول انواع سرسوزن و رنگ هر گیج

رنگ گیج	شماره گیج
	G 32
	G 31
	G 30
	G 29
	G 27
	G 25
	G 23
	G 22
	G 21
	G 20
	G 18
	G 16



لیست محصولات پزشکی آوا پزشکی

نام محصول	مشخصات محصول	تعداد در کارتن
سرنگ ۳ سی سی ۳ تکه	لوئر اسلیپ - لوئر لاک	۲۰۰۰ عدد
سرنگ ۵ سی سی ۳ تکه	لوئر اسلیپ - لوئر لاک	۲۰۰۰ عدد
سرنگ ۱۰ سی سی ۳ تکه	لوئر اسلیپ - لوئر لاک	۶۰۰ عدد
سرنگ ۲۰ سی سی ۳ تکه	لوئر اسلیپ - لوئر لاک	۳۵۰ عدد
سرنگ انسولین یکپارچه	G30-1CC	۲۰۰۰ عدد
سرنگ انسولین یکپارچه	تک استریل - G30	۲۰۰۰ عدد
سرنگ انسولین یکپارچه	G31 - 0.5 CC	۲۰۰۰ عدد
سرنگ انسولین یکپارچه	G31-1CC	۲۰۰۰ عدد
سرنگ خود تخریب (AD)	G23 - 0.5 CC	۲۰۰۰ عدد
پن انسولین	G31 * 6 mm - G32 * 6 mm	۵۰۰۰ عدد
سر سوزن (نیدل) شستشو	G20 - G27	۵۰۰۰ عدد
سر سوزن (نیدل) پزشکی	G18*32 - G18*38 - G20*38 - G21*38 - G22*32 - G23*32 - G25*25 - G27*13 - G30*13	۵۰۰۰ عدد
سر سوزن (نیدل) مزوتراپی	G27*4 - G30*4 - G31*4 - G31*13	۵۰۰۰ عدد
اسکالپ وین	سبز - G21	۱۶۰۰ عدد

● گروه محصولات مینا سرنگ

● شرکت مینا سرنگ رودسر در سال ۱۳۷۹ فعالیت خود را در زمینه تولید انواع سرنگ یکبار مصرف پزشکی آغاز نمود. این شرکت با بکارگیری فناوری روز تولید محصولات پزشکی انواع سرنگ یکبار مصرف پزشکی با کیفیت بسیار بالا و با نام تجاری مینا سرنگ را روانه بازار کند.

● سرنگ سها

● عرضه کننده انواع سرنگ های سها در سایزهای ۲، ۵، ۱۰ و انسولین

سرنگ های ۲ تیکه و ۳ تیکه در سایزهای ۲، ۵، ۱۰، ۲۰، ۵۰ مینا و گاوژ

گروه محصولات باند و گاز



● گروه محصولات باند و گاز

● به دلیل نیاز کلینیکی، بیمارستانی و درمانگاهی دامنه محصولات باند و گاز و همچنین کیفیت متفاوت برندهای موجود در بازار و عدم امکان تشخیص این کیفیت ها از روی بسته بندی سازمان فروش پزشکی شرکت مهرآماطب اقدام به اخذ نمایندگی از برندهای معتبر در این گروه محصولات نموده است و همچنین بر اساس نیاز بازار کلیه محصولات موجود در این گروه قابل عرضه و ارائه به مشتریان محترم می باشد. بر مبنای مصارف کاربری دسته بندی زیر بر اساس انواع باند ها و گاز ها وجود دارد

- پنبه سفید
- پنبه رنگی
- زیرانداز

- باند زیر گچ
- پاس باند
- سرجی فیکس

- باند کنار بافت
- باند گچی ساده
- گچ فایبر گلاس

- گاز وازلینه تک پدی
- گاز وازلینه ۲۴ پدی
- باند کشی
- باند سوختگی
- باند قهوه ای

- گاز استریل
- گاز غیر استریل ساده و خط دار
- گاز دندان پزشکی
- آتل های سنتتیک
- لانگ گاز



گروه محصولات
باند و گاز

- محصولات باند و گاز
- محصولات گل ارکید
- محصولات BPI
- محصولات زرین طب

● لیست برخی از عاملیت های این بخش ●

A عاملیت فروش محصولات باندهای پزشکی ایران (BPI)

مجموعه ای متنوع از محصولات ارتوپدی و بهداشتی شامل رادر سبد کالای تولیدی خود عرضه می نماید.

- باند فایبرگلاس ارتوپدی
- آتل گچی
- آتل های سنتتیک
- انواع باند کشی فشاری
- باندهای پنبه ای و کیسه نخ دار
- باندهای پانسمان کنار بافته شکل پذیر
- انواع پنبه های توپک سفید و رنگی
- آتل اطفال
- انواع گاز طبی جراحی

**B** عاملیت فروش محصولات گل ارکیده

ول باند، پنبه ۱۰۰ گرم، پنبه ۵۰ گرم، پنبه توپک سفید، پنبه توپک رنگی برخی از محصولات این گروه کالا می باشد.

C عاملیت فروش محصولات زرین طب

باند کنار بافت، گاز غیر استریل، گاز استریل، گاز دندان پزشکی، پد الکلی، باند سوختگی برخی از محصولات این برند می باشد.





● گروه محصولات البسه، ماسک و دستکش

- در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها، نوع پوشش کادر درمان و بیماران از اهمیت بالایی برخوردار است. رعایت بهداشت و جلوگیری از انتقال هرگونه آلودگی و همچنین نظم و دسترسی راحت به پرسنل بیمارستان براساس نوع پوشش از جمله دلایل استفاده از البسه بیمارستانی در محیط‌های درمانی است. تامین محصولات در این گروه شامل البسه های بیمارستانی و کلینیکی، انواع ماسک و انواع دستکش می باشد. این دسته بندی بر طبق لیست زیر قابل تامین می باشد. همچنین امکان سفارش محصولاتی منطبق با نیازهای شما خارج از سایزهای استاندارد و یا جنس پارچه مورد نظر شما می باشد.

انواع دستکش



- **دستکش ونیل**
 - دستکش های ونیل نوع ضخیم تر و گشادتر از دستکش های لاتکس می باشند و در برابر اسیدها، قلیاها و الکل ها مقاومت خوبی دارند.
- **دستکش لاتکس پودری و غیر پودری**
 - این دستکش ها در دو نوع پودری و غیرپودری قابل عرضه می باشد.
- **دستکش نیتریل**
 - عمر مفیدتری دارند و راحتی و نرم بودن نیتریل و همچنین الگوی چسبناک آنها نسبت به دستکش های ونیل، به راحتی دست کمک بسیار می کند.
- **دستکش های جراحی بدون پودر و دستکش جراحی پودر کم**
 - دستکش جراحی بدون پودر استریل و یکبار مصرف ● استریل شده توسط گاز اتیلن اکساید EO و اشعه گاما ● عاری بودن سطح بیرونی و درونی دستکش از هرگونه پودر ● کاهش حساسیت های پوستی ناشی از پودر دستکش جهت مصرف کننده و عوارض ناشی از پودر برای بیمار
- **دستکش نخی**
 - جلوگیری از عوارض محیطی بر روی دست همچون خشکی دست، پوسته پوسته شدن، ترک خوردگی و ناراحتی های شایع پوستی که بر اثر باد، سرما، گرما، آفتاب و ... بوجود می آید. تهیه شده از پارچه ای که با پوست سازگار می باشد.
- **دستکش یکبار مصرف فریزی**
 - این محصول از مواد درجه یک ساخته شده کاملاً شفاف و بدون بومی باشد از این محصول می توانید در تمامی امور روزمره زندگی و کار استفاده کنید. به طور مثال در آشپزخانه منزل و مطب ها. بیمارستان ها. فست فودها و رستوران ها. آرایشگاه ها. برای نقاشی ساختمان و سایر موارد.



انواع ماسک



● ماسک سه لایه

● جهت جلوگیری از نفوذ ذرات معلق موجود در هوا از قبیل میکروب ها و ویروس ها به داخل دهان یا بینی مورد استفاده قرار می گیرند.

● ماسک فیلتر دار N95 فیلتر دار و بدون فیلتر

● طبقه N، شامل ماسک هایی است که منحصراً برای استفاده در اتمسفرهایی با ذرات غیر روغنی، کاربرد دارد.

البسه بیمارستانی



● برخی از البسه های بیمارستانی و کلینیکی

● **گان یک بار مصرف (جراح و بیمار):** دارای ۲ بند در پشت سر است. یکی در ناحیه گردن و دیگری در پشت کمر قرار گرفته است.

● **شان یک بار مصرف:**

● **لباس بیمار:**

● **آستین چه یکبار مصرف:** جفت آستین است که در قسمت سر و ته آن ها کش نازک قرار دارد و از مچ تاروی بازوها کشیده می شود. آستینچه به دو صورت مشمایی و پارچه یکبار مصرف موجود است.

● **پاپوش یک بار مصرف:** یا کاور کفش که هنگام ورود به بخش ICU باید بر روی کفش پوشیده شود.

● **کلاه یک بار مصرف:** در انواع مختلفی مانند کلاه مشمایی دورکش، کلاه یکبار مصرف آکاردئونی، کلاه بیمار یکبار مصرف و کلاه جراح یکبار مصرف تولید و عرضه می شود.

● **شلوار یک بار مصرف:** کاربردهای مختلفی دارد و بیشتر برای کسانی که امکان شستشوی لباس را ندارند مورد استفاده قرار می گیرد.

● **ملحفه و روبالشتی یک بار مصرف:** عموماً در بیمارستان ها و مراکز پزشکی و مطب ها مورد استفاده قرار می گیرد و معمولاً روزانه یا بعد از هر بیمار یا مراجعه کننده تعویض می شود. ملحفه ها به صورت رولی پرفراژدار در عرض و طول مختلف تولید و عرضه می گردد.

● **کلاه آکاردئونی:** در مراکز درمانی، بیمارستان ها، صنایع غذایی و دارویی و... رعایت بهداشت امری ضروری است و استفاده از کلاه یکبار مصرف جهت جلوگیری از ریزش مو بسیار معمول می باشد. در این راستا کلاه آکاردئونی به علت حجم کم و راحتی پیشنهاد می شود.

● **عینک محافظ:** این عینک، برای جلوگیری از ورود یا پاشیدن مایع یا محلول آزمایشگاهی یا شیمیایی به چشم کاربرد دارد. این عینک از جنس پلاستیک و دارای دسته بغل کرکره ای است.





● گروه محصولات چسب و پانسمان

● چسب پانسمان یکی از محصولات دسته تجهیزات پزشکی و پانسمان است. از انواع محصولات این گروه میتوان به انواع چسب شامل: چسب حصیری، چسب ضد حساسیت، چسب لکوپلاست، چسب بخیه و... نام برد. چسب بینی ضد حساسیت برای پس از عمل جراحی بینی نیز در بخش چسب پانسمان جای دارد. این چسبها برای بیماران با پوست های حساس مناسب است. چسبهای پانسمان انعطاف پذیری بالایی داشته، با پوست سازگار و نسبت به هوا و بخار آب نفوذ پذیر هستند. دسته بندی زیر برخی از محصولات این گروه می باشد.



● چسب لکو پلاست: (Zinc oxide adhesive plaster)

● این چسب از الیاف بافته شده پنبه ای آغشته شده با چسب زینک اکساید می باشد و برای تثبیت کردن پانسمان یا کاتتر استفاده می شود. در دمای بین ۵- تا ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری شود.

● چسب ضد حساسیت

● ویژگی های غیر قابل چشم پوشی این چسب، شامل: ضد حساسیت، قیمت مناسب، بر جای نماندن چسب بر روی پوست بعد از برداشتن آن، قابل مصرف برای تمام افراد حتی پوست های حساس، نداشتن لاتکس طبیعی

● چسب حصیری

● از چسب های حصیری جهت محکم کردن پانسمان ها استفاده میگردد. این چسب ها در هر اندازه ای قابل برش هستند.

● چسب بخیه

● از ویژگی های این چسب قدرت چسبندگی بالا، مقاوم در برابر آب و رطوبت، مقاومت بیشتر در برابر عفونت می باشد.

● چسب اتوکلاو

● نواری چسبنده است که در اتوکلاو کردن (گرم کردن) استفاده می شود. از آن به عنوان یک نشانگر در اتوکلاو بخار مورد استفاده قرار می گیرد.





● پانسمان آماده

- کمک به کنترل خونریزی، جذب خون و ترشحات زخم، جلوگیری از آلودگی زخم، حفاظت زخم از میکروب‌ها و صدمات در طول التیام و نگهداری زخم. از ویژگی‌های این محصول می‌توان به ضد حساسیت، نفوذ پذیری هوا، دارای پد مخصوص با قدرت جذب بالا، حساسیت پایین، عدم چسبندگی روی زخم، نرمی اشاره کرد.

● پانسمان آماده ضد آب

- مناسب برای زخم‌های خیلی شدید شامل زخم بستر و زخم دیابت، مناسب برای زخم‌های ناشی از ضربه، زخم‌های جراحی، زخم‌های ناشی از خراش. جذب بالا، ضد آب بودن و قابلیت تنفس بالا، نگهداری رطوبت و نچسبیدن پانسمان آماده به زخم می‌باشد.

● چسب کمر

- تسکین دهنده دردهای مفاصل، عضلانی، ستون فقرات، رماتیسم و سیاتیک

● چسب آنژیوکت

- این پانسمان یک پوشش استریل چسب دار وریدی است که برای تثبیت انواع وسایل تزریقی مثل آنژیوکت، کاتتر و اسکالپ به کار می‌رود و در محل تزریق آنژیوکت یا کاتتر دارای یک پد مخصوص می‌باشد.

● چسب تزریق

- جلوگیری از خونریزی بعد از تزریق، استفاده آسان، دارای پد بسیار جاذب غیر چسبنده، ضد حساسیت، چسبندگی قوی در عین جدا شونده‌گی آسان، در بسته بندی ۱۰۰ عددی

● چسب زخم کودک

- مناسب برای استفاده کودکان برای زخم‌های سطحی



● محلول های ضد عفونی و بهداشتی

● ۱۵ تا ۲۰ درصد عفونت های بیمارستانی در هوا معلقند. با توجه به این موضوع و خطر بالای عفونت ها و ویروس ها برای بیماران همه بیمارستان ها باید به فکر کنترل و مهار این عفونت ها از طریق محلول های ضد عفونی کننده باشند. استفاده از محلول های ضد عفونی کننده، در این روزهای کرونایی، جزء جدانشدنی زندگی انسان امروزی شده است. حال اگر بحث استفاده از محلول ضد عفونی کننده در بیمارستان به میان بیاید نیز باید به صورتی جدی تر دست به انتخاب زد. چون بیمارستان محلی حساس و حیاتی برای انواع بیماران با بیماری ها و امراض گوناگون آنهاست. بیماری هایی که ممکن است واگیر داشته باشند و یا نسبت به میکروب ها مقاومت کمی داشته باشند. مکان هایی در بیمارستان ها نیز مثل اتاق عمل، CCU، ICU که جز بخش مراقبت های ویژه قرار دارند و باید نسبت به دیگر فضاها بیمارستانی از ایمنی و ضد عفونی بیشتری برخوردار باشند.

● انواع مواد گندزدا در بیمارستان

- گندزداها موادی هستند که بر روی سطوح بی جان و برای نابودی عوامل بیماری زا استفاده می شوند. گندزداها سبب استریل شدن اشیانی می شوند و نمی توان گفت همه میکروب ها را نابود می کنند. گندزداها به دو دسته تقسیم می شوند:
- فیزیکی: حرارت، استفاده از سرما، خشک کردن، پرتو دهی یا اشعه دادن
- شیمیایی: آلدئید، فرمالدئید، استریلیزه کننده های شیمیایی گازی شکل، اسیدها، الکل ها، فنول و مشتقات آن
- پس از بیان کاربرد گندزداها، در ادامه به معرفی برخی از انواع گندزداهای معروف و پرکاربرد در بیمارستان ها پرداخته می شود:
- استرانیوس: گندزدایی ابزار مقاوم به حرارت الزنکوسکوپسور
- فانیوس: گندزدایی سطوح و کف
- 50AF دکونکس: گندزدایی سطوح و کف
- دکونکس 53 پالس: ضد عفونی ابزار
- DD1 آنیوزایم: گندزدایی ابزار
- اسپری سریع الاثر میکروزید: گندزدایی سطوح
- وایتکس 5%: گندزدایی سطوح و وسایل

آب ژاول

● آب ژاول را برای گندزدایی و یوزدایی به کار می برند. از این ماده در صنعت به عنوان رنگ زدا و سفید کننده پارچه و خمیر کاغذ استفاده می شود. در خانه ها برای ضد عفونی کردن و سفید کردن رخت ها به هنگام رختشویی از آب ژاول استفاده می کنند. این محلول با نام های گوناگون در بازار به فروش می رسد.

ژل سونوگرافی (ژل الکتروود)

● ژل سونوگرافی بر پایه آب بوده و در تمام مراحل انجام سونوگرافی به صورت یک روان کننده (لوبریکانت) عمل مینماید تا تصویر بزرگتری از ناحیه اسکن شده برای دستگاه سونوگرافی ایجاد نماید.

ضد عفونی کننده (۴ لیتری)

● برای مصارف خانگی و برای ضد عفونی دست به کار می رود. قابل تامین از انواع برندهای موجود در بازار و با درصدهای مختلف الکل.





● لیست ضد عفونی کننده های بیمارستانی

- استفاده از محلول های ضد عفونی کننده در بیمارستان، یکی از مهم ترین عوامل موثر بر مهار عفونت ها در بیمارستان است. این محلول ها نسبت به گندزداها نقش بسیاری در از بین بردن ویروس ها و... دارند. بهترین و معروف ترین آن ها شامل موارد زیر می شود:
 - هیپوکلریت سدیم در سطوح محیطی بیمارستان: در پیشگیری از عفونت و منجر به مهار رشد میکروارگانیسم هاست.
 - پراکسید هیدروژن: آلودگی توسط عوامل بیماری زای مقاوم در برابر چند دارو در سطوح نرم مانند پرده های کنار تخت را کاهش می دهد.
 - آب الکترو لیز شده: در کاهش باکتری های هوازی بدون باقی گذاشتن هیچ پسماند سمی بر روی سطوح موثر است.
 - پلاسما فشار اتمسفر: فعالیت ضد باکتریایی در برابر انواع پاتوژن ها دارند.
 - ضد عفونی کننده نانو نقره: محصولی جدید و غیر الکلی است که خاصیت ضد قارچی هم دارد.
 - دکوسپت: یکی از معروف ترین محلول های ضد عفونی دست است.
 - سپتی اسکراب: اسکراب قبل از عمل دست جراح و کادر اتاق عمل به کار می رود.
 - بتادین (پوویدون آیدین 10 درصد): جهت ضد عفونی کردن پوست و سوختگی های درجه 2 و 3 و همچنین ضد عفونی کردن محل تزریق و در آخر در پیشگیری از عفونت در بخیه و پانسمان موثر است.
- بر اساس توضیحات بالا سازمان فروش پزشکی شرکت مهرآما تمامی نیازهای مشتریان عزیز از این محصولات را تامین میکند.

بتادین

- در انواع بتادین سبز در بسته بندی های ۶ میلی لیتری، ۲۵۰ میلی لیتری، یک لیتری و ۴ لیتری، بتادین قهوه ای در بسته بندی های ۶ میلی لیتری، یک لیتری و ۴ لیتری

ژل لوبریکانت

- شفاف و قابل حل در آب است و به جهت روان کنندگی در معاینات و عمل های جراحی زنان استفاده می گردد. مناسب برای انواع معاینات پزشکی توشه واژینال و رکتان، سونداژ، الکترو تراپیو... می باشد

آب مقطر

- در انواع تقطیر شده یک لیتری، دولیتری، سه لیتری، چهار لیتری، پنج لیتری و بیست لیتری




● ملزومات عمومی

- ماسک اکسیژن: ماسک اکسیژن اطفال، بزرگسال، رزرو بگ دار
- نازل اکسیژن
- لوله تراکئوستومی: در مواقعی که تنفس از مجرای که انسان از آن تنفس می کند (بینی و دهان) ممکن نباشد، تراکئوستومی توصیه می شود.
- مانومتر
- آمبوبگ Bag valve mask: آمبوبگ یک مخزن هوایی سیلیکونی و یا پلاستیکی که بطور دستی در ایجاد فشار مثبت ریوی در شرایط پنوموتوراکس استفاده می شود.
- تب سنج: لیزری جیوه ای دیجیتال
- اریگاتور: شستشوی زخم
- رپید تست کووید ۱۹
- یورین بگ: کیسه ادرار دخترانه و پسرانه
- گردن بند فیلا دلفیا: مدل معمولی و نای باز
- آتل انگشت: دوازده عددی
- آبسلانگ
- لگن زیر بیمار
- لوله ادرار: جهت جمع آوری ادرار برای افرادی که قادر به رفتن به سرویس بهداشتی نمی باشند و یا بیماری که دچار تکرر ادرار می باشند.
- دمیار: دمیار نوزاد، اطفال و بزرگسال
- قطره چکان دارویی
- لوله آزمایشگاهی
- عینک محافظ آزمایشگاهی
- چست لید ● سوآپ پنبه دار ● کیسه ادرار صلیبی ● کپسول اکسیژن و ...

● ملزومات تخصصی

- نخ جراحی
- تیغ بیستوری
- لوله تراشه: کاف دار، بدون کاف
- سوند های پزشکی: سوندها از دو جنبه نوع و محل قرارگیری و مدت زمان باقی ماندن در محل باهم تفاوت دارند. انواع گوناگون آن شامل موارد زیر می شوند:
- سوند نلاتون: سوندهای ساده یا نلاتون یا یکبار مصرف
- سوند فولی (دوشاخه یا سه شاخه)
- سوند معده
- سایز ۱۰ مشکی تعداد در کارتن ۴۸۰
- سایز ۱۲ سفید تعداد در کارتن ۴۰۰
- سایز ۱۴ سبز تعداد در کارتن ۳۶۰
- سایز ۱۶ نارنجی تعداد در کارتن ۳۶۰
- سایز ۱۸ قرمز تعداد در کارتن ۳۶۰
- تب سنج: در انواع لیزری، جیوه ای، دیجیتال
- اریگاتور: جهت شستشوی زخم
- ایروی: جلوگیری از بسته ماندن راه تنفسی فرد، مناسب مواقعی که فرد دچار تصادفات شدیدی یا تشنج میشود، استفاده راحت، در سایزهای مختلف، دارای لبه ای صاف برای جلوگیری از زخم شدن کام
- چست باتل
- ساکشن تیوب
- چست تیوب: لوله سینه ای یک لوله پلاستیکی انعطاف پذیر جهت تخلیه ترشحات در فضای بین ریه ها و قفسه سینه که به آن جنب می گوئیم گذاشته می شود.

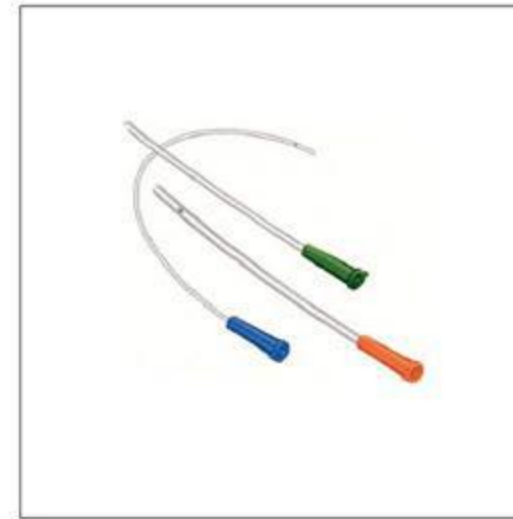

گروه محصولات
خانواده سلامت
و استومی

- انواع بخور
- انواع فشار سنج
- کیسه سرد و گرم
- محصولات استومی

کرم محافظ کامفیل
۴۷۲۰ کلوپلاستچسب پایه آلترنا
۱۹۷۳ کلوپلاستخمیر استومی
۲۶۵۰ کلوپلاستکیسه کلستومی
ایلئوستومی

● محصولات خانواده سلامت ●

● کیسه های استومی



- استوما به قسمتی از روده که بیرون جداره شکم می باشد گفته می شود و استومی به ایجاد سوراخی بر روی شکم برای قرار دادن استوما اطلاق می شود. در واقع استومی عمل جراحی است که روده را از طریق سوراخ به شکم می چسباند. سه نوع استومی معروف را به شرح زیر است: .
- **ایلئوستومی:** ایلئوستومی قسمت انتهایی روده کوچک را به پوست وصل می کند. ایلئوستومی برای افرادی مناسب است که روده بزرگشان به شدت آسیب دیده است، یا دچار بیماری های التهاب روده هستند. در ایلئوستومی دهانه روده کوچک را در سمت راست شکم از جهت تحتانی قرار می دهند.
- **کلستومی:** در کلستومی دهانه روده بزرگ را روی شکم قرار می دهند. با این کار به بدن اجازه دفع مدفوع داده می شود و از سوی دیگر قسمت آسیب دیده روده درمان می شود. برای ایجاد کلستومی از هر بخش روده بزرگ می توان شروع به جراحی کرد.
- **یوروستومی:** در یوروستومی یک استوما برای دفع ادرار روی شکم ایجاد می کنند. برای یوروستومی بهتر است که از کیسه های شیردار که مانع برگشت ادرار هستند استفاده شود. کیسه های کلستومی با برندهای زیادی در بازار موجود است.

● کیسه یوروستومی یک تکه

- کیسه یوروستومی آلترنا ۵۵۸۵، شیردار، اتکه، شفاف و دارای چسب مارپیچی منحصر به فرد می باشد که برای امنیت و سازگاری با پوست طراحی شده است. در این کیسه چسب آن به کیسه چسبیده و ثابت می باشد. برای تغییر آن، کل سیستم برداشته شده و جایگزین می شود. از مزایای این کیسه میتوان به: خروجی پلاستیکی نرم آن به راحتی قابل کنترل است. طراحی کیسه این اطمینان را می دهد که پس از تخلیه، هیچ ادراری در کیسه باقی نخواهد ماند. دریچه برگشتی مانع از پاشش ادرار بر روی استوما می شود و خطر عفونت های ادراری را کاهش می دهد. کیسه ضد بو می باشد. اشاره کرد.

● کیسه کلستومی ۱۷۵۰۰ آلترنا

- کیسه کلستومی ۱۷۵۰۰ آلترنا کلوپلاست از پرمصرفترین و پیشرفته ترین محصولات مراقبت از زخم استومی کمپانی کلوپلاست می باشد. از مهمترین ویژگیها و مزایای آن میتوان به موارد زیر اشاره نمود: کیسه قابل تخلیه و دارای چسب می باشد، به همین دلیل از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است. کیسه ۱۷۵۰۰ بصورت یک تکه، ته باز و مات می باشد. کیسه ۱۷۵۰۰ را می توان بدون جدا سازی از بدن تخلیه نمود.



مهرازمطب
مشهد، هاشمی رفسنجانی ۳۴،
چهارراه اول سمت چپ
بین تقویه ۷ و ۹

www.mehrazmateb.com
Info@mehrazmateb.com

